

Aorta

ステントグラフトのタッチアップに適した圧着用バルーンカテーテル

SG BALLOON CATHETER

TMP **SG** BALLOON
CATHETER



 TOKAI MEDICAL PRODUCTS

カテーテル有効長72cmのコンパクト設計

180cmガイドワイヤーを用いる事で、よりハンドリングが容易に


迅速なイン／デフレーションを実現

コアキシャル構造により、広いバルーン拡張用ルーメンを確保
短時間でのバルーンの拡張・収縮が可能に


ステントグラフトの圧着に適したポリウレタンバルーン

仕様

カタログ番号	カテーテル有効長	カテーテル外径	バルーン全長	適応シース	最大ガイドワイヤー径	JANコード
SG-207207	72cm	7Fr	3cm	12Fr	0.035inch	4580137879428

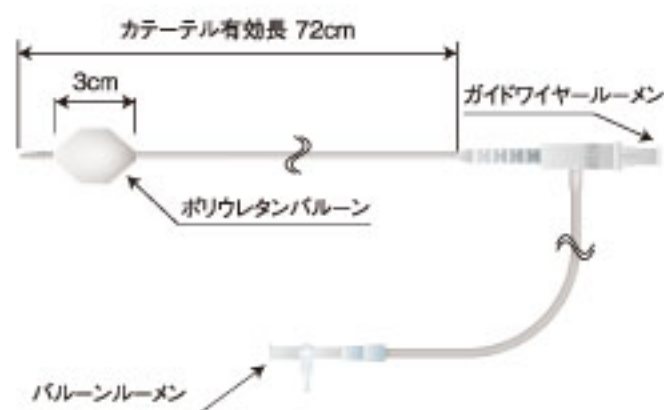

■拡張径参考値

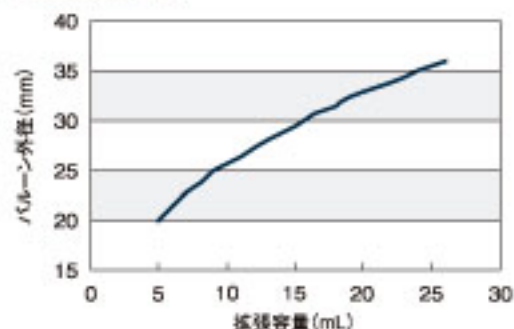

- 販売名:TMP SGバルーンカテーテル
- 一般的名称:中心線導糸血管拡張用チューブ及びカテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号:2230082X00192000
- 高度管理医療機器 クラスⅢ
- 保険請求分類:血管内手術用カテーテル(3) PTAバルーンカテーテル②
大動脈用ステントグラフト用 A 血液濾過型(胸部及び腹部)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市向原町字更屋敷1485番地

お客様センター TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者