


PCI | BALLOON CATHETER

Apollo

■仕様

バルーン長	バルーン直径 / 製品番号							
	2.00mm	2.25mm	2.50mm	2.75mm	3.00mm	3.25mm	3.50mm	4.00mm
8mm	802-2008J	802-2208J	802-2508J	802-2708J	802-3008J	802-3208J	802-3508J	802-4008J
15mm	802-2015J	802-2215J	802-2515J	802-2715J	802-3015J	802-3215J	802-3515J	802-4015J
18mm	802-2018J	802-2218J	802-2518J	802-2718J	802-3018J	802-3218J	802-3518J	802-4018J

圧力 (atm)	バルーンコンプライアンス / バルーン直径 (mm)							
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00
8	1.96	2.20	2.45	2.69	2.94	3.18	3.42	3.90
10	1.98	2.23	2.47	2.72	2.97	3.22	3.46	3.95
12 NOM	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00
14	2.02	2.27	2.53	2.78	3.03	3.29	3.54	4.05
16	2.04	2.30	2.56	2.81	3.07	3.32	3.58	4.10
18	2.07	2.33	2.58	2.84	3.10	3.36	3.63	4.16
20	2.09	2.35	2.61	2.87	3.13	3.40	3.67	4.21
22 RBP	2.11	2.38	2.64	2.90	3.17	3.43	3.72	4.27
24	2.14	2.40	2.67	2.94	3.20	3.47	3.76	4.32
26	2.16	2.43	2.70	2.97	3.24	3.51	3.80	4.38
28	2.18	2.46	2.73	3.00	3.27	3.55	3.85	4.44

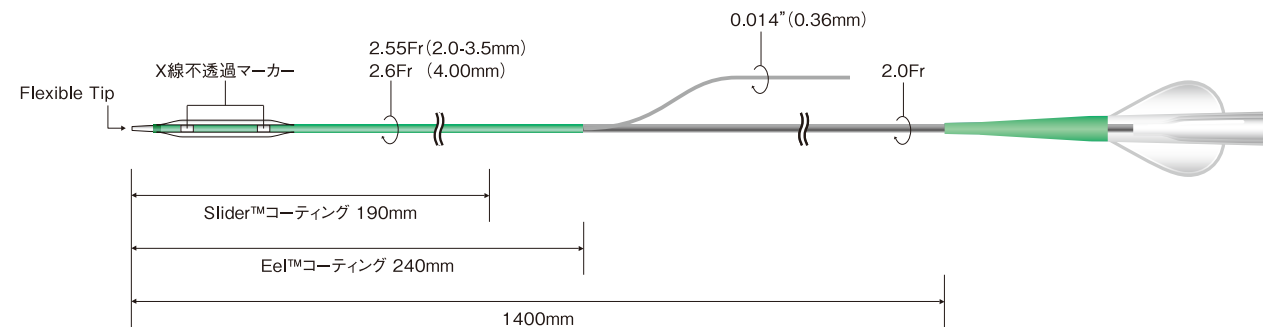

- 販売名: Apollo PTCA/バルーンカテーテル
 - 一般的名称: 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 - 再使用禁止
 - 承認番号: 22900BZX00269000
 - 高度管理医療機器 クラスIV
 - 保険請求分類: 心臓手術用カテーテル 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型
- 改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

Hanaco ハナコメディカル株式会社
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11
TEL 048-881-4001 FAX 048-881-9878



BrosMed Medical Co., Ltd
15th building, SMEs Venture Park
SongShan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone
Dongguan 523808, Guangdong China
TEL +86 (769) 22892018 FAX +86 (769) 22892016

販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ
本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地
お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
E-mail info@tokaimedpro.co.jp


TMP-1911382-02

Coronary

理想的なノンコンプライアンスマテリアルに操作性を備えたハイプレッシャーバルーン

PCI | BALLOON CATHETER

Apollo

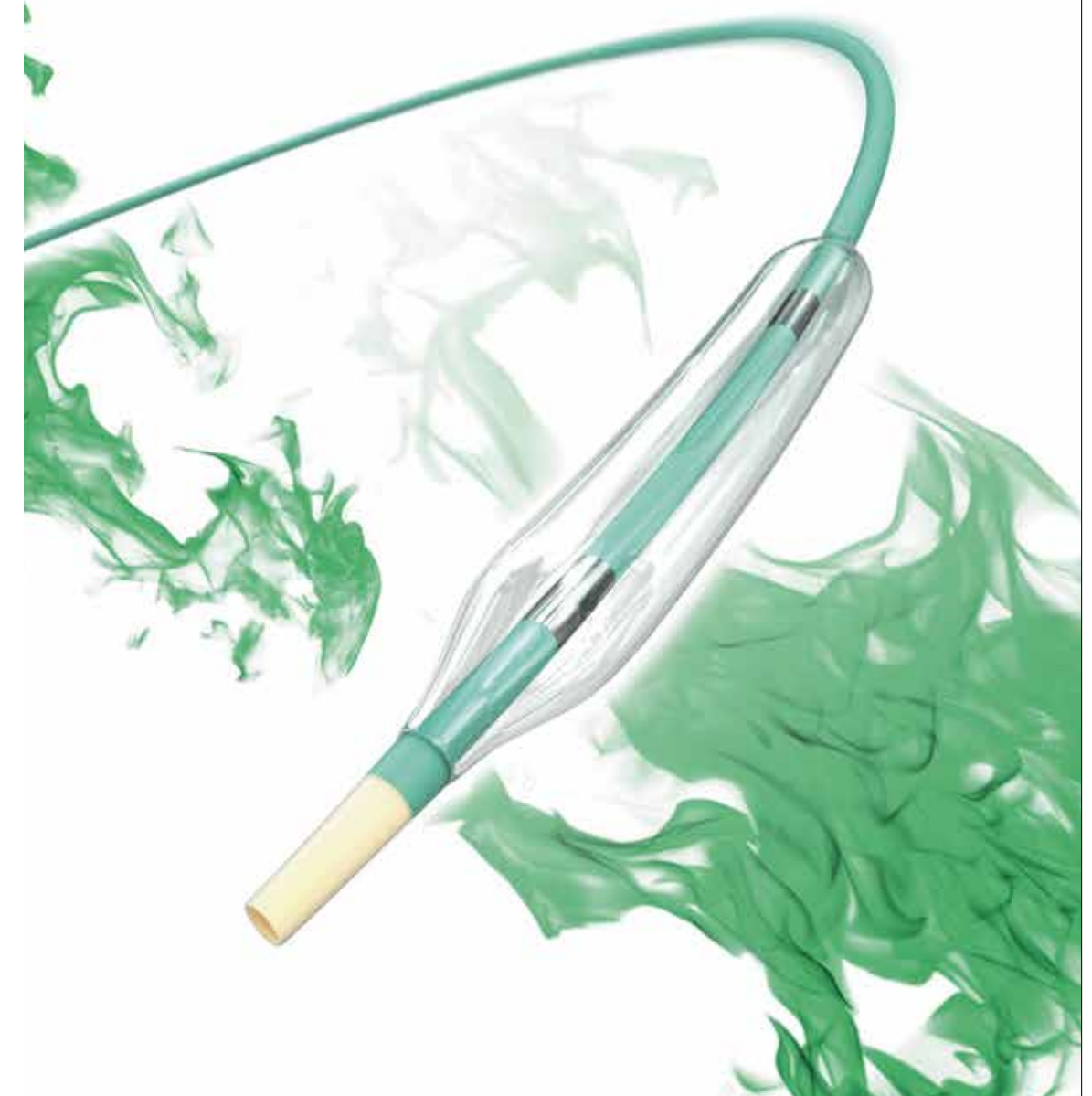

TOKAI MEDICAL PRODUCTS

独自のコーティングテクノロジー

Slider™ Hydrophilic Coating (Outer surface)

Eel™ Coating (guide wire lumen)

卓越したノンコンプライアンスの
ハイプレッシャーバルーン

0.55%

バルーンのコンプライアンスを最小限にし、
推奨拡張圧からRBPまで0.55%の差

*3.25mm径まで

3.0%

軸方向のバルーンの伸率

(推奨拡張圧からRBPまで)

優れたバランスを追求した先端チップは、
2種のチップ長で通過性を向上

2.0 - 3.0mm **3.25 - 4.0mm**

先端チップ長 2.0mm

先端チップ長 2.5mm

22atm



先端チップ拡大写真