


GW
SERIES

最先端までスムーズなトランジション構造で、屈曲蛇行において優れた操作性を発揮

GW | GUIDE WIRE

GUIDE WIRE
M-Lead®

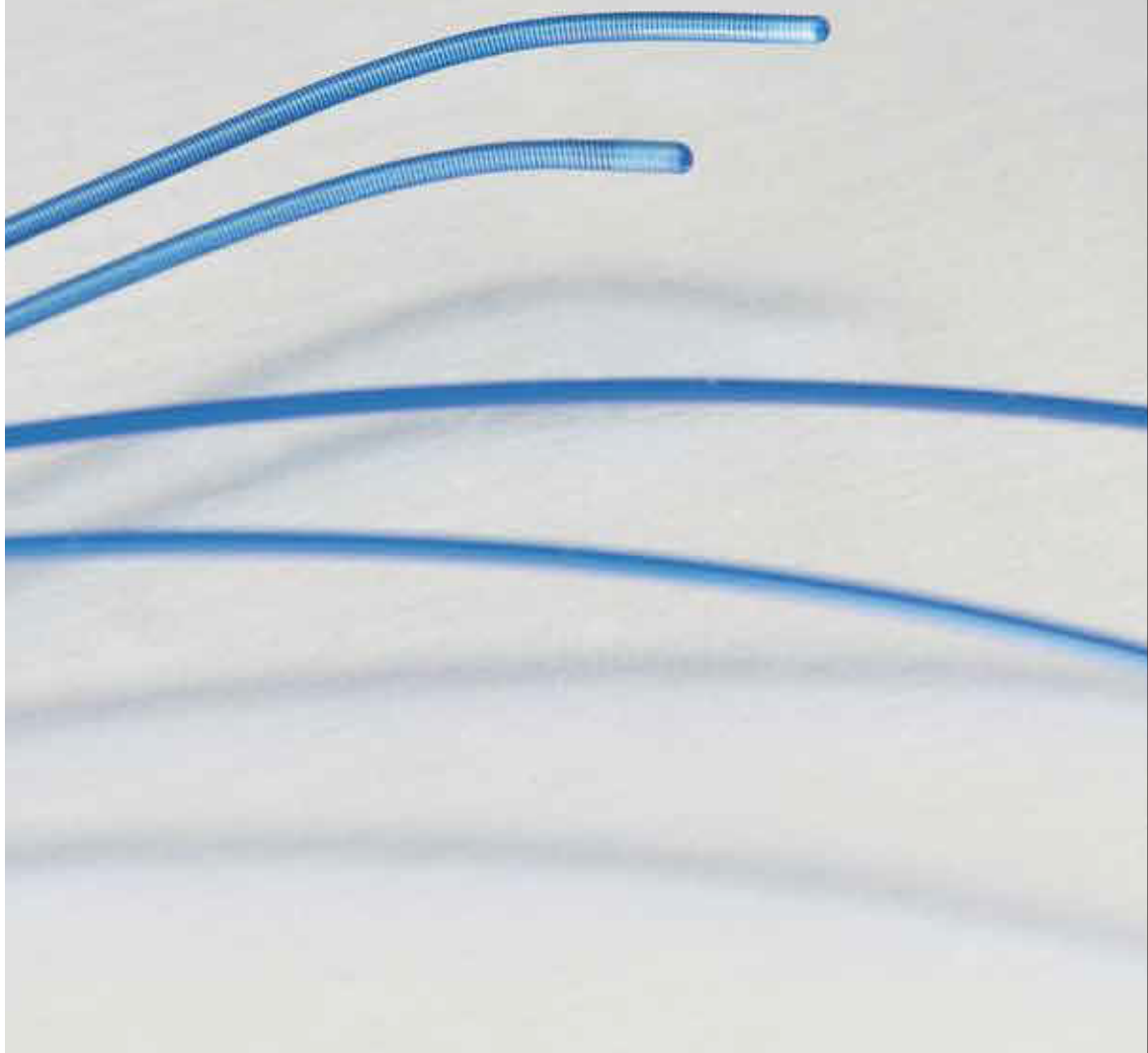

Tip Shaping

ステンレススチールコア+プラチナステンレスコイルによる優れたシェイプ・リシェイプ特性

Torque Response

ステンレススチール製ワンピースコアがもたらす高いトルク応答性能

Slip Durability


PUジャケット+親水性コーティングによる高い潤滑性と潤滑耐久性

■仕様

カタログ番号	全長	親水性コーティング長	JANコード
ML16-180S	180cm	177cm	4562382436588
ML16-165S	165cm	162cm	4562382436595

■共通仕様

外径	X線不透過長	コイル長	先端形状
0.016inch(0.40mm)	5cm	30cm	ストレート

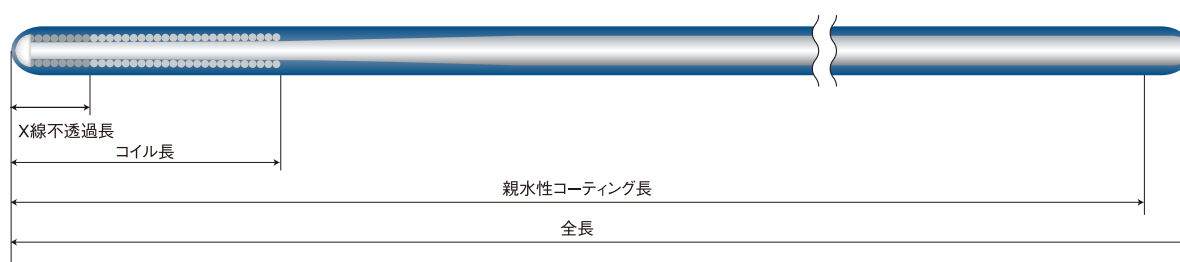

■付属品

トルクデバイス、インサートデバイス、シェイピングロッド

- 販売名:TMPガイドワイヤーI
 - 一般的名称:心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
 - 再使用禁止
 - 承認番号:23000BZX00220000
 - 高度管理医療機器 クラスIV
 - 保険請求分類:血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用
- 改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者