

Peripheral


操作性×直進性チューンモデル

トルクポーターに新たなラインナップ

PCI PENETRATION CATHETER

TORQORter®

NEO

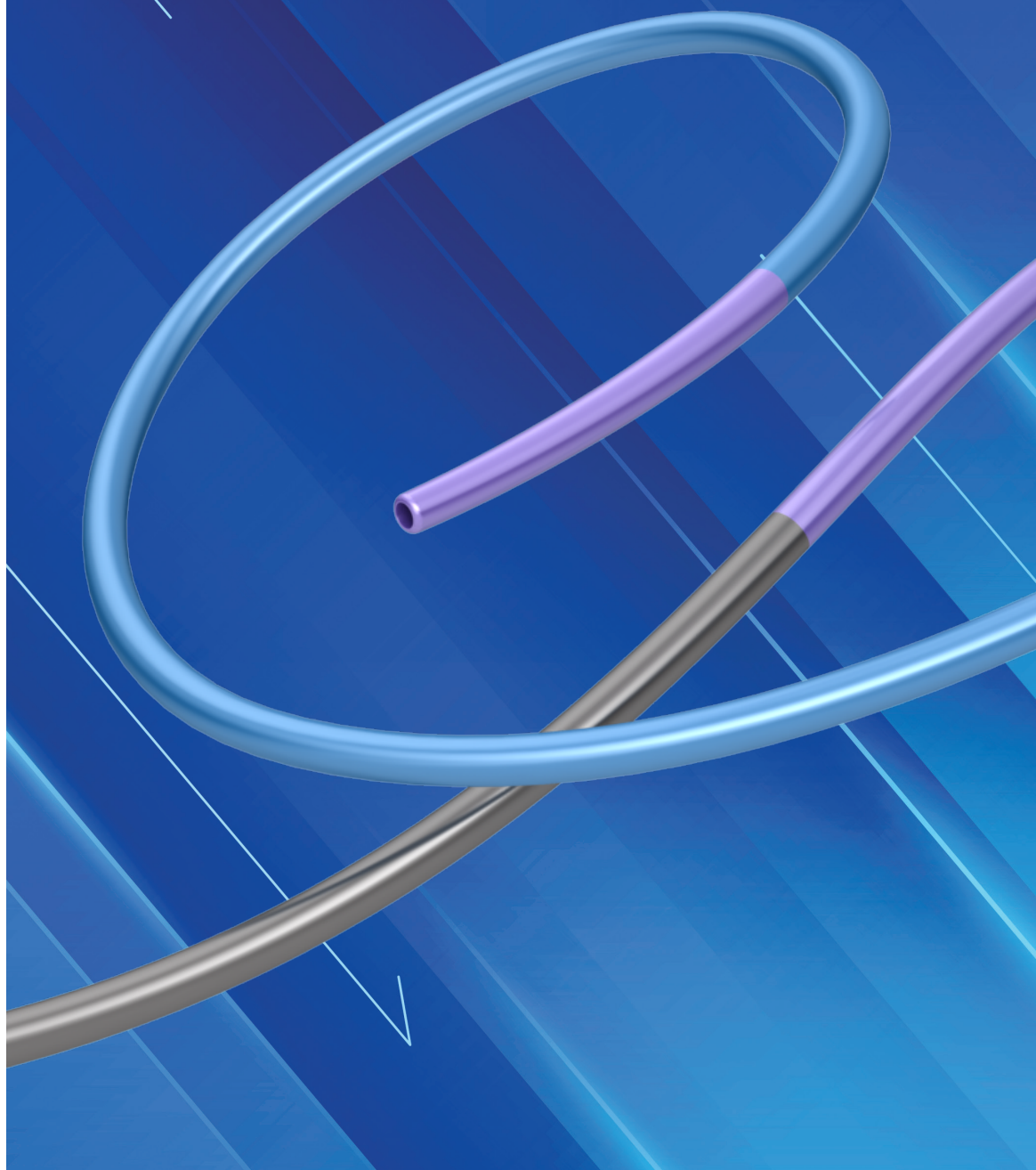

ハードシャフトと良好なトルク操作性により、 狭窄部を切れ良く通過するサポートタイプ


〈 マルチレイヤーテクノロジー 〉

多層レイヤーからトルクロスが少ない操作性 ※回転限度:一方向に3回転以下
デュアルコイル構造による回転方向を問わないトルク伝達性を実現
ディスタルの特殊編組採用により強度と柔軟性の両立を実現 ※特許取得済

■仕様

| カタログ番号 | 有効長 (cm) | 全長 (cm) | コーティング長 (cm) | JANコード |
|---------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| PCTN090 | 90 | 97 | 60 | 4562382439916 |
| PCTN110 | 110 | 117 | 60 | 4562382439923 |
| PCTN135 | 135 | 142 | 60 | 4562382439930 |
| PCTN150 | 150 | 157 | 60 | 4562382439947 |

| ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch) | プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch) | 適合最小ガイディング カテーテル 内径 (inch) | 適合最大 ガイドワイヤ径 (inch) | マーカーク数 | 最大耐圧 (psi) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|---------------|
| 2.3 / 0.015 | 2.7 / 0.018 | 0.038 | 0.014 | 1 | 300 |

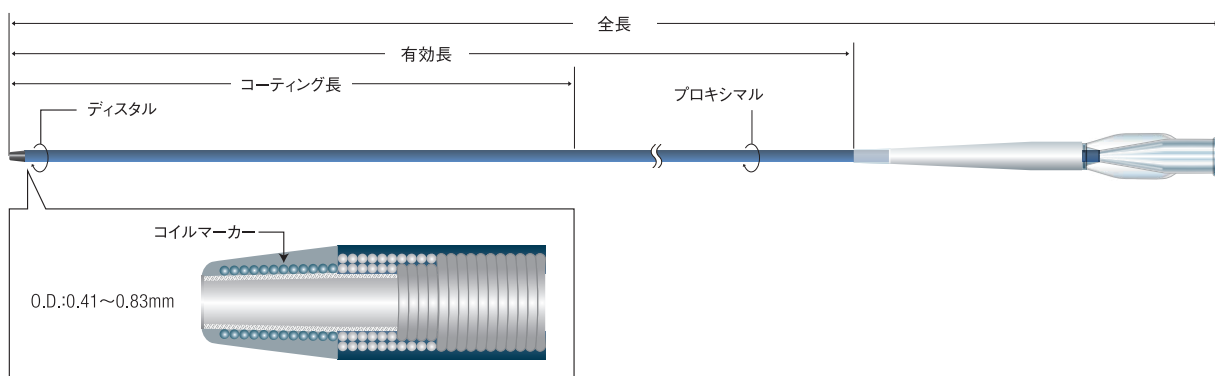

- 販売名:TMPサポートカテーテルⅢ
- 承認番号:23000BZX00221000
- 一般的名称:血管狭窄部貫通用カテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止
- 保険請求分類:狭窄部貫通用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者