

Peripheral

YC | Y-CONNECTOR

SMA CONNE

TMPスマートコネクタ[®]

スマートな手技を形にするニューコンセプト



**GOOD
DESIGN**


コンセプト

EVT向け、特にラディアルアプローチにおける組合せデバイスの長さ不足の低減を目的にショートタイプのYコネクタを開発。サイドポートは、アーチ形状でデザインし、ガイドワイヤ等の誤挿入を低減。

レバー付タイプは、オープナーの操作を軽くします。付属のガイドワイヤホルダは、スリットにガイドワイヤ等を挟んで保持させることができます。



製品仕様

全長(mm)	ID(mm)	最大耐圧(psi)
58	3.3 (対応デバイス:9Fr.)	600 (固定バルブが閉じた状態)

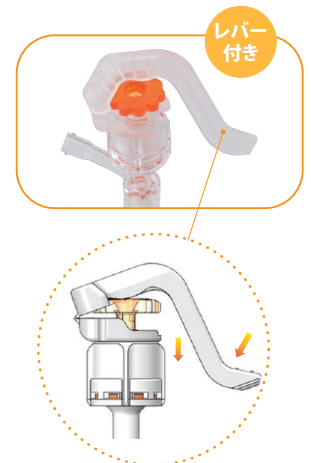

製品番号	製品仕様	付属品	JANコード	入り数
YC09	レバー付 ショート	インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ / ガイドワイヤホルダ	14580737310021	5
YC10	ショート	インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ / ガイドワイヤホルダ	14580737310038	
YC11	レバー付 ショート	インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ	14580737310045	
YC12	ショート	インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ	14580737310052	

アクセサリ

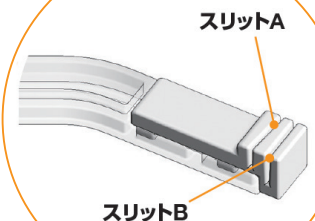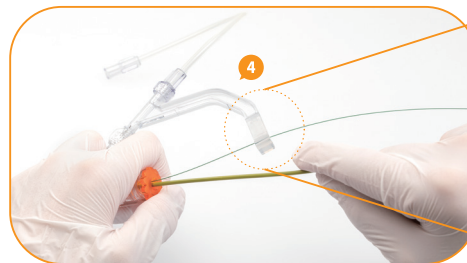

No.	品名	仕様
1	トルクデバイス	0.010~0.018inchガイドワイヤ対応
2	インサータ	内径=0.025inch(0.018inchガイドワイヤ対応)
3	延長チューブ	22cm、最大耐圧:600psi
4	ガイドワイヤホルダ	スリットA 適応ワイヤ外径:0.36mm(0.014") スリットB 適応ワイヤ外径:0.36~0.67mm(0.014"~0.026")

販売名:TMP Yコネクタ I
一般的な名称:バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
再使用禁止

承認番号:30400BZX00258000
管理医療機器

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者