


Peripheral

マルチレイヤーテクノロジーが生み出す高いトルクコントロール

PC | PENETRATION CATHETER

TORQ  orter

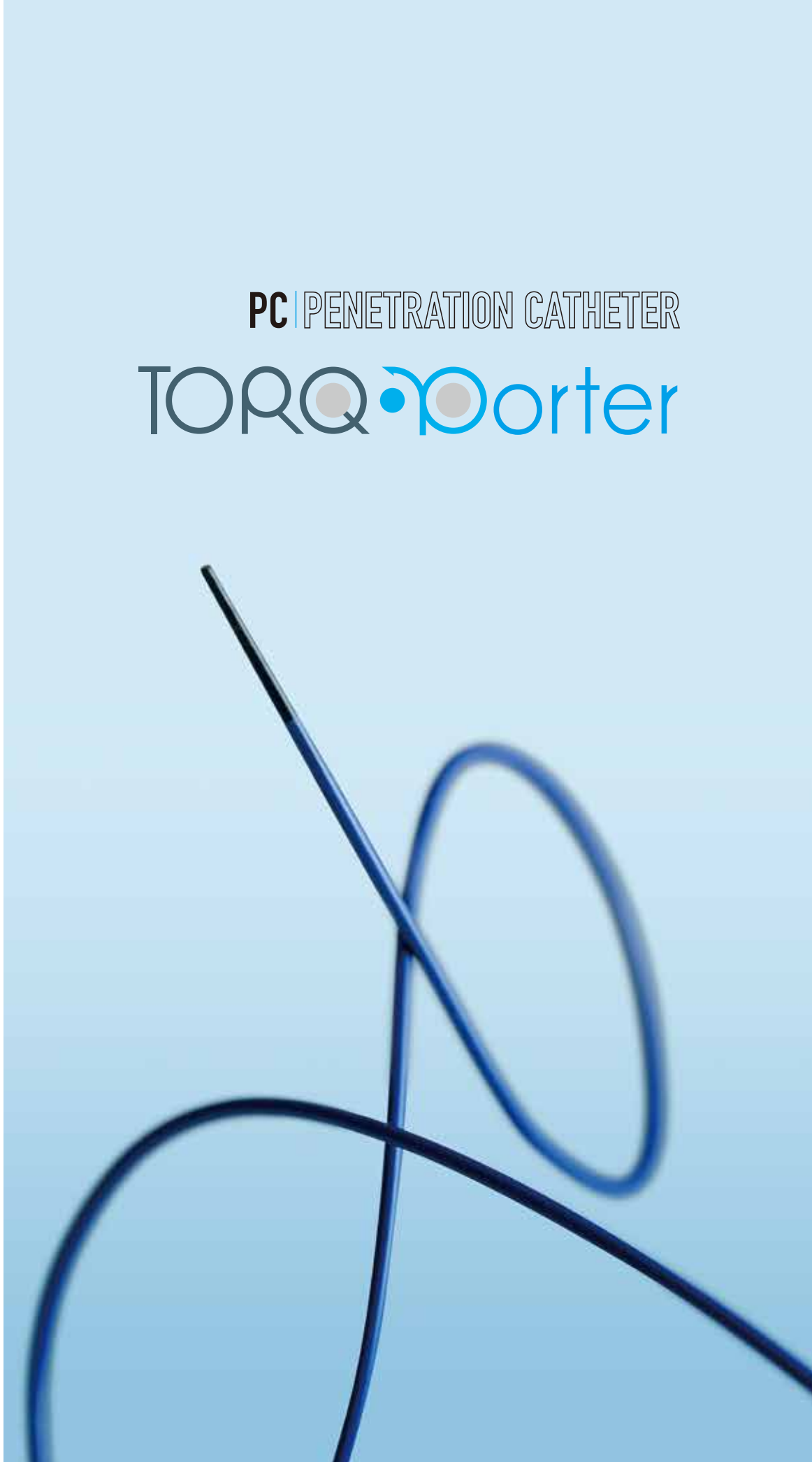


〈マルチレイヤーテクノロジー〉

多層レイヤーからトルクロスの少ない操作性能 ※回転限度:一方向に3回転以下
 デュアルコイル構造による回転方向を問わないトルク伝達性を実現
 ディスタルの特殊編組採用により強度と柔軟性の両立を実現 ※特許取得済

■仕様

カタログ番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	JANコード
PC-TP1409A	90	97	60	4562382437929
PC-TP1411A	110	117	60	4562382437950
PC-TP1415A	150	157	120	4562382437943
PC-TP1413AS	135	142	60	4562382437967
PC-TP1415AS	150	157	60	4562382437974

ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	適合最小ガイドイング カテーテル 内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤ径 (inch)	マーカ―数	最大耐圧 (psi)
2.3 / 0.015	2.7 / 0.018	0.038	0.014	1	300

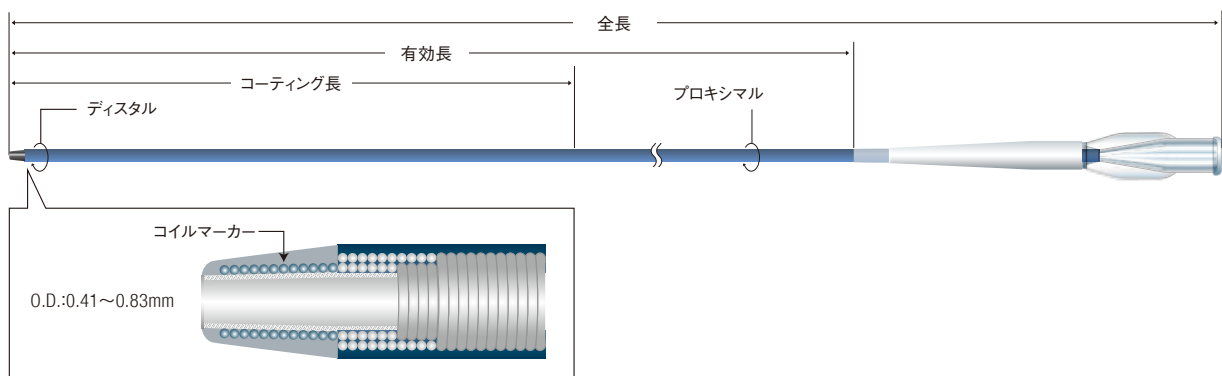

- 販売名:TMPサポートカテーテルⅢ
- 承認番号:23000BZX00221000
- 一般的名称:血管狭窄部貫通用カテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止
- 保険請求分類:狭窄部貫通用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者