



Peripheral

GW | GUIDE WIRE

ACROSS [®] **B**

S
F
A
閉
塞
病
変
の
F
i
r
s
t
C
h
o
i
c
e

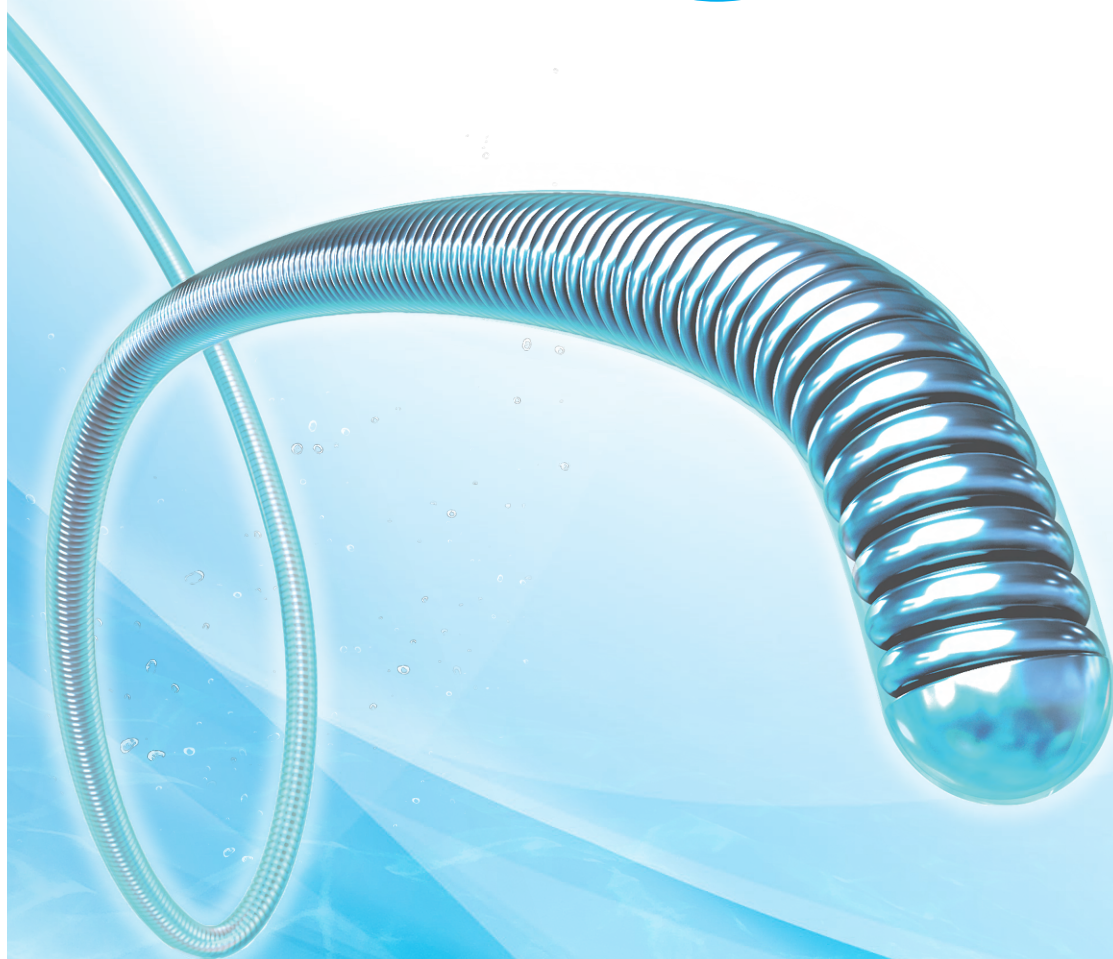

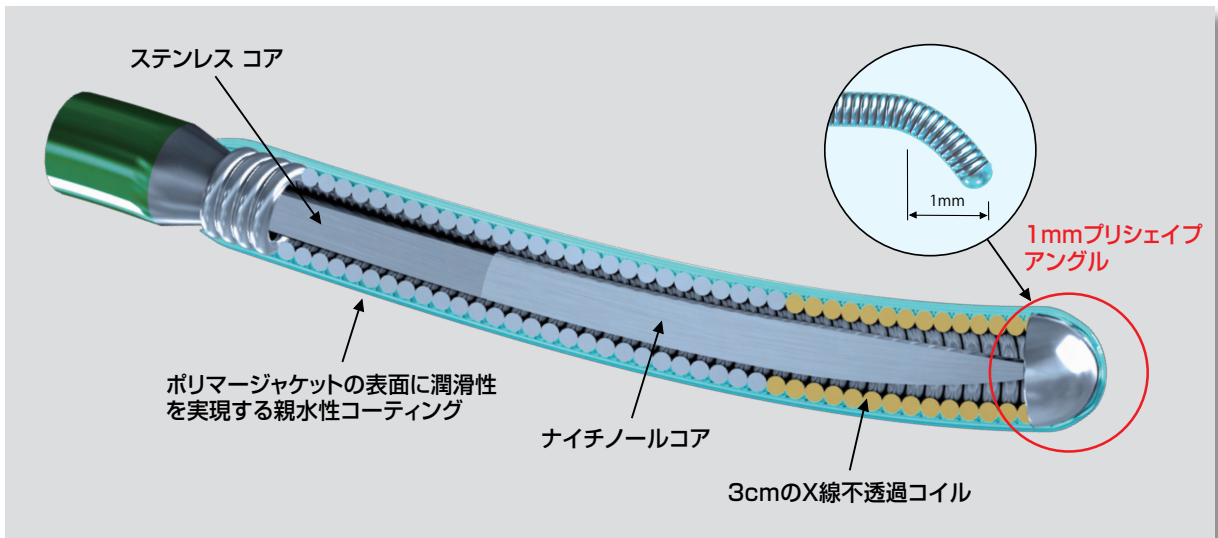

- 1mmプリシェイプアングル ———— ニチノールコアにアングル形状を記憶させることで先端形状のメモリー性を向上させています。
- ニチノールコア ———— 先端部のニチノールコアは、トルク性と先端耐久性能 (Durability) を向上させています。
- ハイブリットコア ———— ニチノールコアの長さを可能な限り短くし、ステンレスコアと結合させることで、操作性を向上させています。
- ポリマージャケット ———— 先端コイル表面にポリマージャケットと親水性コーティングをコーティングしています。

■仕様

外径 (inch)	X線不透過長 (cm)	コイル長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状
0.014 (0.36mm)	3	25	26	プリシェイプ

	製品番号	全長 (cm)	先端荷重※ (g)	JANコード
ACROSS 3	GW314-235A	235	3	4580737310116
	GW314-300A	300	3	4580737310109

※:当社ガイドワイヤの先端荷重の値は、社内標準試験をもとに、ガイドワイヤ先端が病変を押す力を想定した公称値です。実際の製品の値には個体差があります。

- 販売名:TMPガイドワイヤーII
- 承認番号:30100BZX00250000
- 一般的名称:心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
- 高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類:血管造影用ガイドワイヤー 微細血管用

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者