

EPDI Embolic Protection Device

Optimal Wire

製品使用図



製品仕様

1. オクリュージョンバルーンカテーテル


製品番号	シャフト外径 [inch]	カテーテル全長 [cm]	有効長 [cm]	バルーン外径 [mm]	スプリングコイル長 [cm]	JANコード
BW2006	0.014	220	200	3~6	2.5	4580737310420

2. アスピレーションカテーテル


製品番号	カテーテル内径 [inch]	カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル [Fr]	適合ガイドワイヤ径 [inch]	適合ガイドワイヤ径 [Fr/inch]	JANコード
BW2006	0.047	5.3/4.2	0.014	6/0.070	4580737310420

本体形状図

1. オクリュージョンバルーンカテーテル

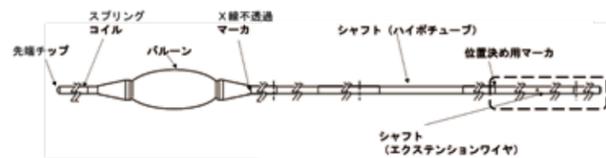

2. アスピレーションカテーテル

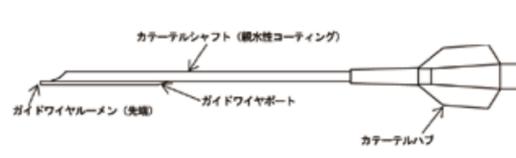

- 販売名: Optimal Wire プロテクションシステム
- 一般名称: 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号: 30500BZX00138000
- 高度管理医療機器クラスIV
- 保健請求分類: 血管内手術用カテーテル/血管内血栓除去用留置カテーテル/頸動脈用ステント併用型/遠位バルーン型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
 URL http://www.tokaimedpro.co.jp/
 E-mail info@tokaimedpro.co.jp


販売業者

Neuro

Be in charge of your protection

EPDI Embolic Protection Device

Optimal Wire

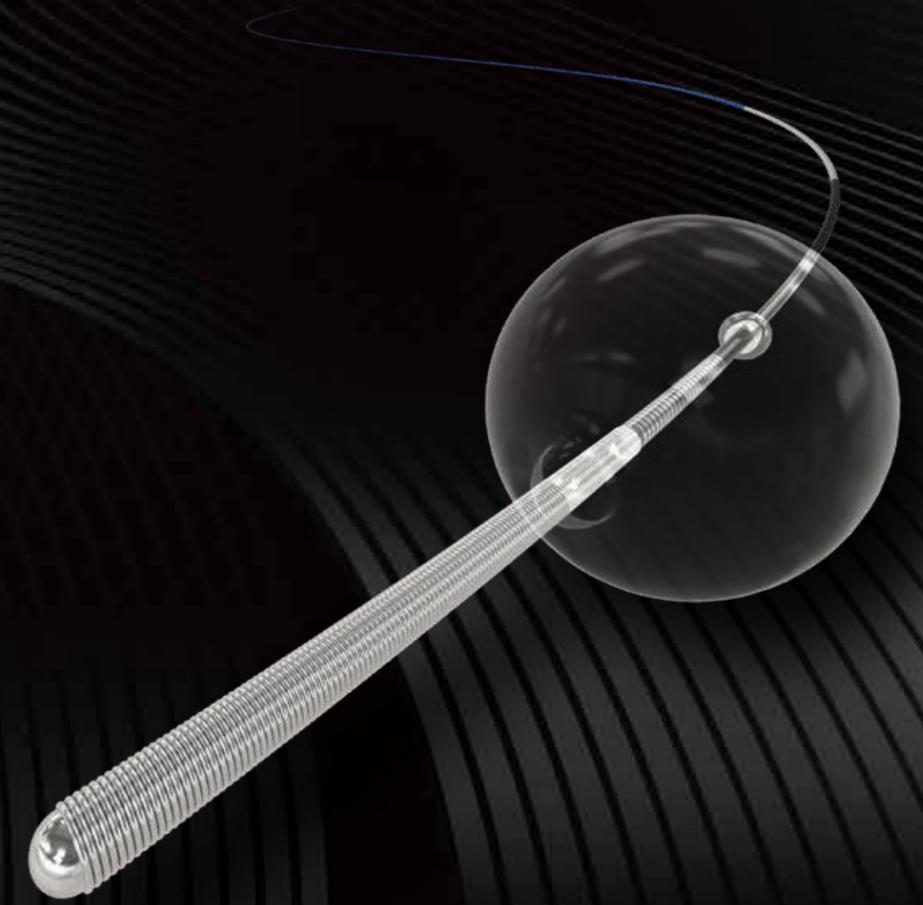

TOKAI MEDICAL PRODUCTS

Distal Balloon Protection System

最大バルーン
直径 6mm

0.014inchで
シェイパブルな
スプリングコイル


血管への
侵襲性が低い
柔らかい
バルーン

吸引力を重視したアスピレーションカテーテルを付属



6Fr. のアスピレーションカテーテルを付属しました。吸引口の内径を大口径に、カテーテル有効長はあえて少し短くすることで、必要な吸引力を確保しました。
また、Rapid Exchange 型なので交換も容易です。

充実の付属品

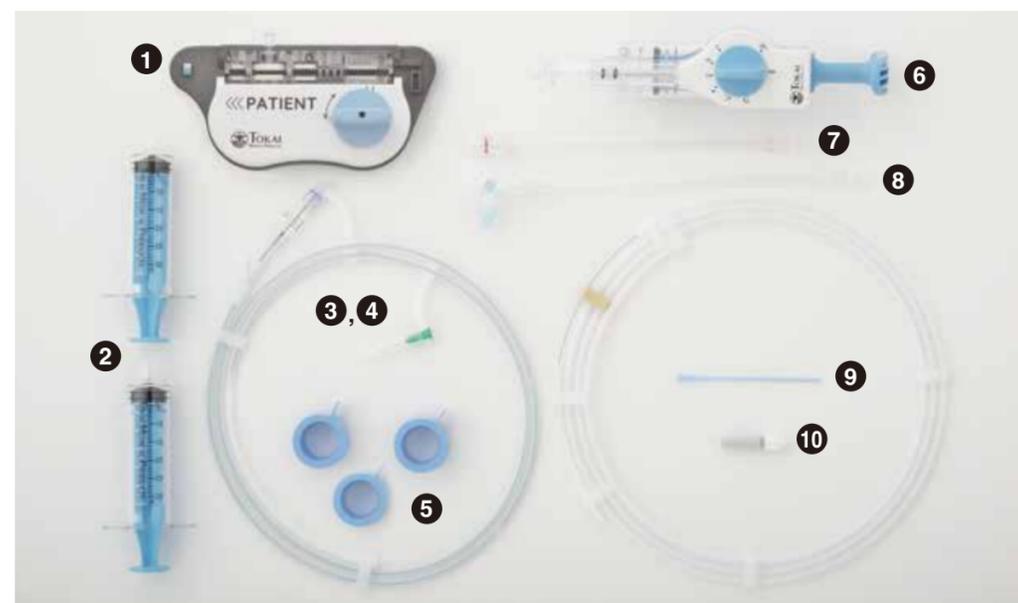

※③と④はあらかじめ組み合わされています。

- ①BWアダプタ×1
- ②30mLバックロックシリンジ×2
- ③アスピレーションカテーテル×1
- ④スタイレット×1
- ⑤セルストレーナー×3
- ⑥BWフレータ×1
- ⑦延長チューブ×1
- ⑧アスピレーションライン×1
- ⑨インサータ×1
- ⑩トルクデバイス×1