


製品使用図

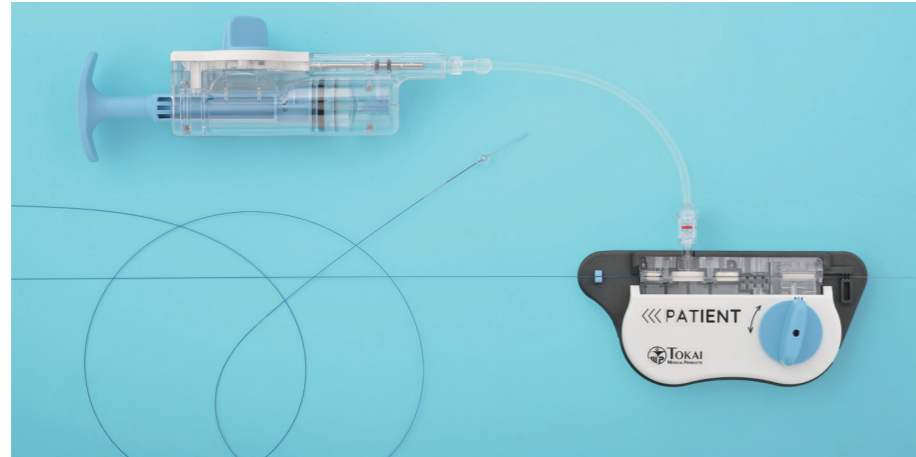

製品仕様

1. オクリュージョンバルーンカテーテル


製品番号	シャフト外径 [inch]	カテーテル全長 [cm]	有効長 [cm]	バルーン外径 [mm]	スプリングコイル長 [cm]	JANコード
BW2006	0.014	220	200	3~6	2.5	4580737310420

2. アスピレーションカテーテル


製品番号	カテーテル内径 [inch]	カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル [Fr]	適合ガイドワイヤ径 [inch]	適合ガイディングカテーテル径 [Fr/inch]	JANコード
BW2006	0.047	5.3/4.2	0.014	6/0.070	4580737310420

本体形状図

1. オクリュージョンバルーンカテーテル

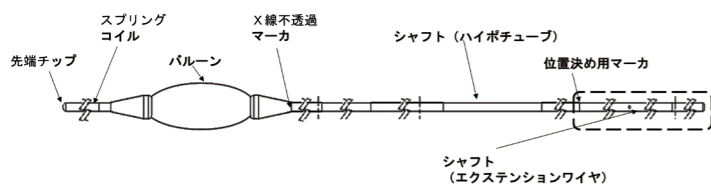

2. アスピレーションカテーテル

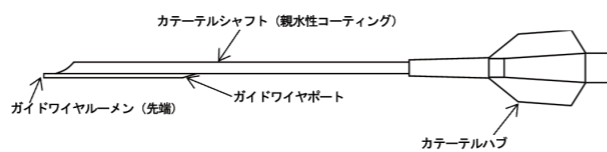

- 販売名: Optimal Wire プロテクションシステム
- 承認番号: 30500BZX00138000
- 一般的名称: 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル
- 高度管理医療機器クラスIV
- 再使用禁止
- 保健請求分類: 血管内手術用カテーテル/血管内血栓異物除去用留置カテーテル/頸動脈用ステント併用型/遠位バルーン型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>


E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者

Be in charge of your protection

EPD | Embolic Protection Device

Optimal Wire

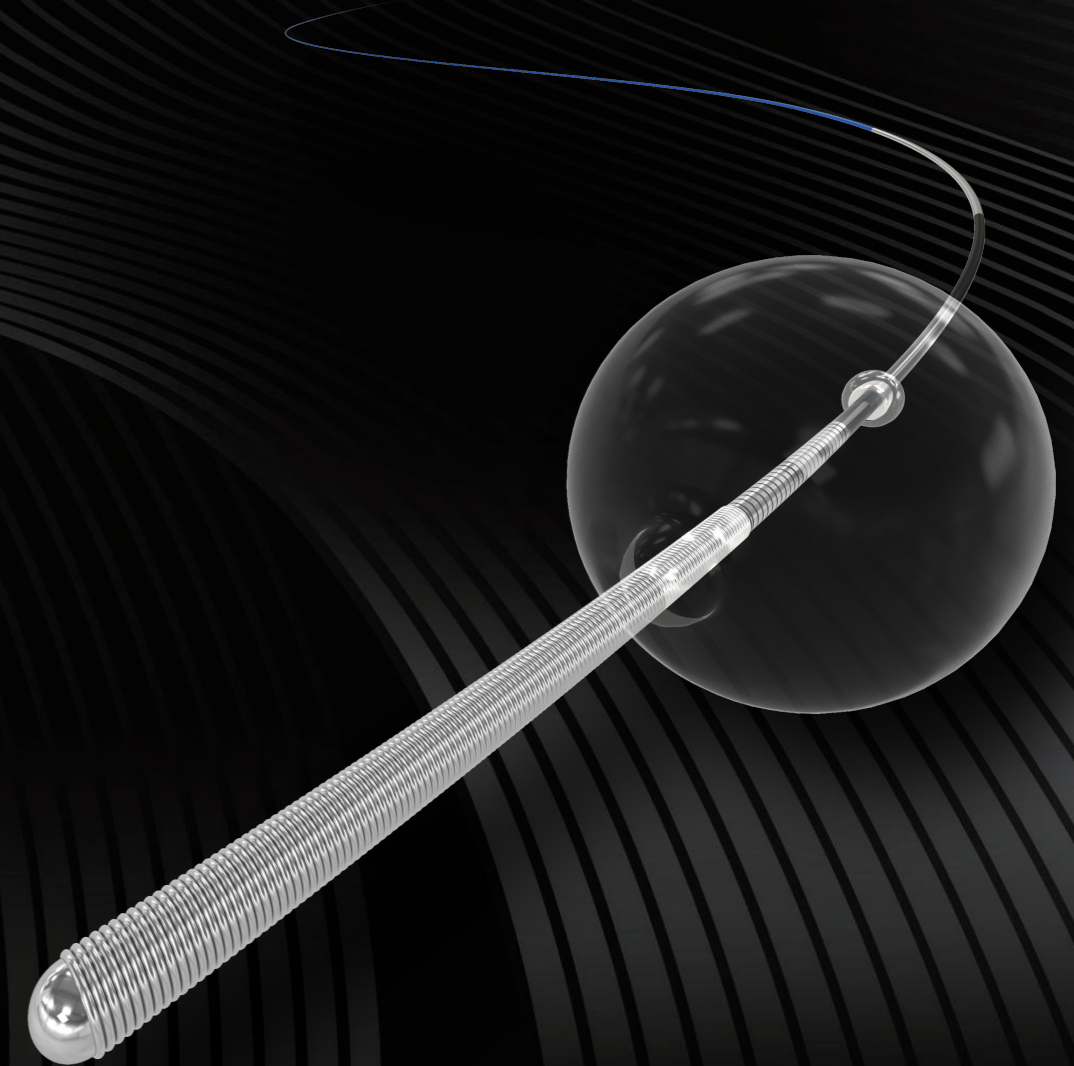


# Distal Balloon Protection System

最大バルーン  
直径 6mm

0.014inchで  
シェイパブルな  
スプリングコイル


血管への  
侵襲性が低い  
柔らかい  
バルーン

## 吸引力を重視したアスピレーションカテーテルを付属

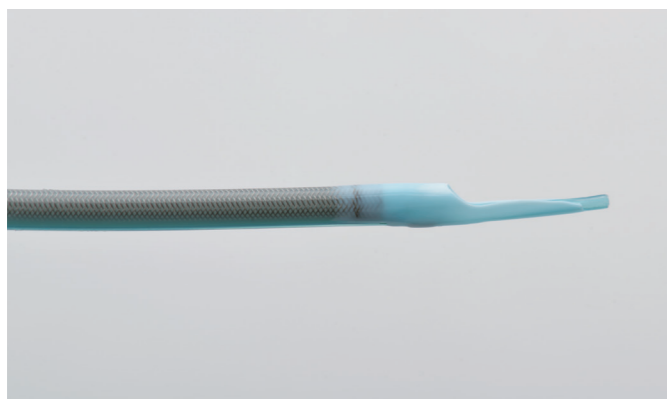

6Fr. のアスピレーションカテーテルを付属しました。吸引口の内径を大口径に、カテーテル有効長はあえて少し短くすることで、必要な吸引力を確保しました。  
また、Rapid Exchange 型なので交換も容易です。

## 充実の付属品

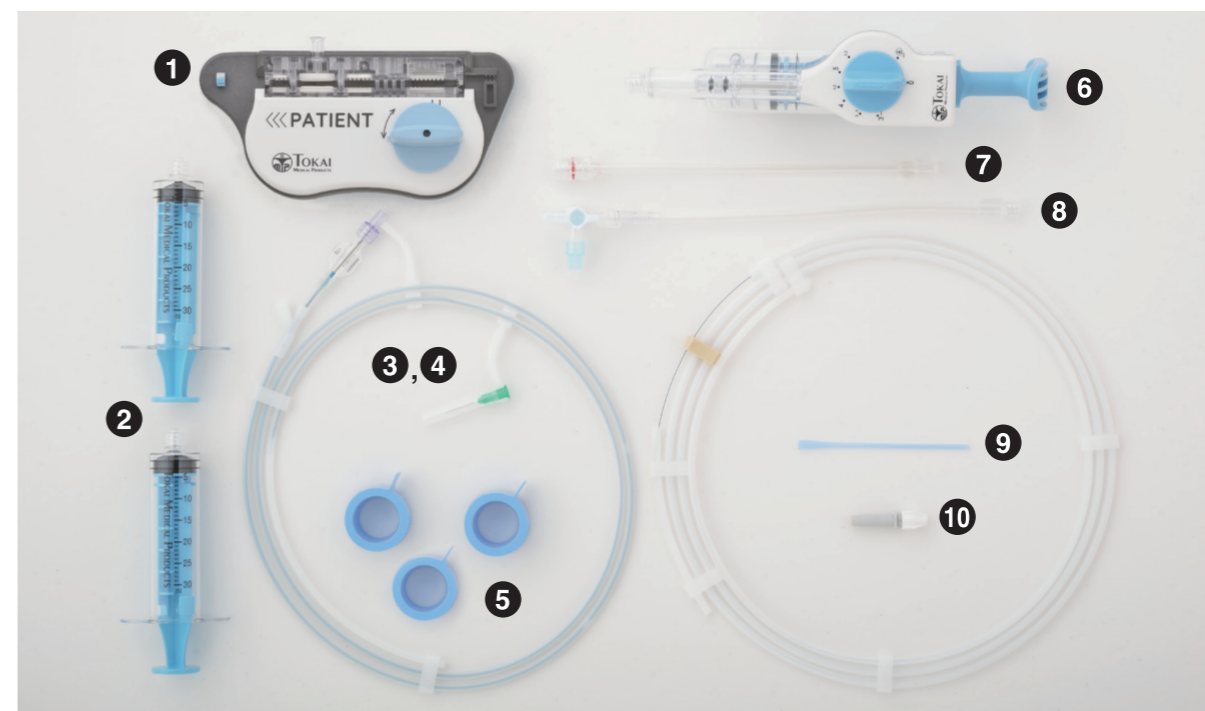

※③と④はあらかじめ組み合わされています。

- ①BWアダプタ×1
- ②30mLバックロックシリンジ×2
- ③アスピレーションカテーテル×1
- ④スタイレット×1
- ⑤セルストレーナー×3
- ⑥BWフレータ×1
- ⑦延長チューブ×1
- ⑧アスピレーションライン×1
- ⑨インサータ×1
- ⑩トルクデバイス×1