


仕様

カタログ番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	JANコード
MCMA135	135	144	100	4580737311366

ディスタル 外径(Fr)／内径(inch)	プロキシマル 外径(Fr)／内径(inch)	適合最大 ガイドワイヤ径(inch)
1.7／0.017	2.8／0.023	0.016

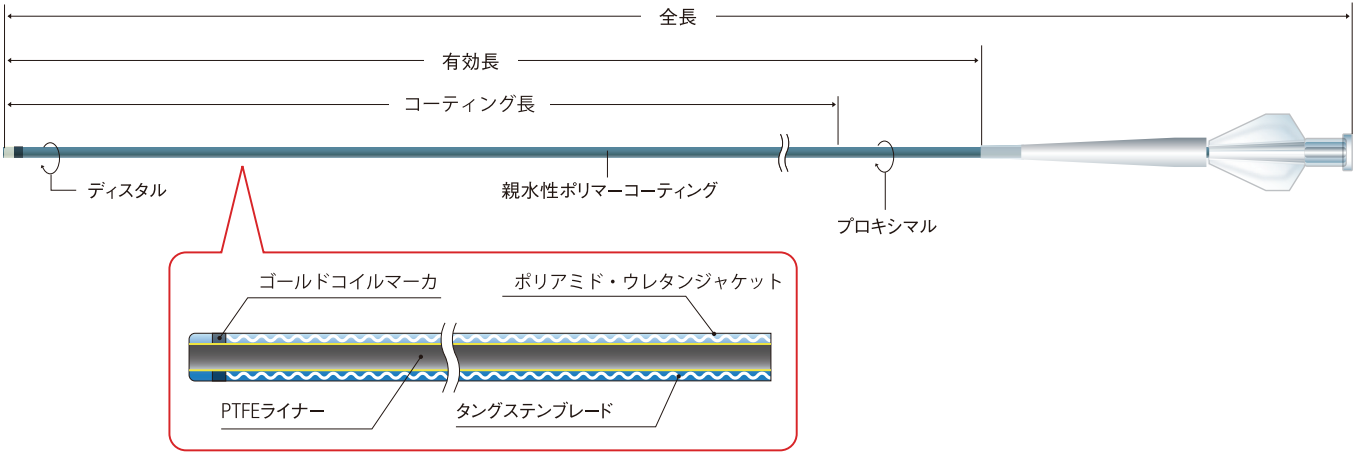

- ☐販売名:TMP マイクロカテーテルX
- ☐承認番号:30700BZX00083000
- ☐一般的な名称:中心循環系マイクロカテーテル
- ☐クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- ☐再使用禁止
- ☐保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社／〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者



MCIMICRO CATHETER

CIMA

CIMA

Routineに快適さを、
Complexに活路を

01

プロキシマル側のシャフト外径を
2.8Frとすることで、サポート性を
高めました。

02

マーカー付近に造影剤を練りこみ、
カテーテル先端の透視下視認性を強化
しました。

03

Proximal: 0.023inch、Distal:
0.017inchの広い内腔は、ワイヤー
操作性、チップインジェクションの
簡便さを提供します。

最先端が柔らかく難渋する血管走行にも追従できます。

