


ED | EXCHANGE DEVICE

Victoria II[®]


- 01 バルーン有効長を長くし、ガイドワイヤーのトラップ性を向上
- 02 バルーンのラッピング方法を見直し挿通に影響の少ないバルーンプロフィール
- 03 シャフトバランスを見直し、シャフト全体のコシをアップ
- 04 コネクタをピンク色にしたため他のデバイスと区別が付きやすい

◀ 先端にホバーリンクチップ搭載 ▶


HOVer-link tip…バルーン内部のチップが延長している構造。コアワイヤーのdistal部分を保護し、繰り返し使用しても「へたりにくい」



カテーテル有効長107cm

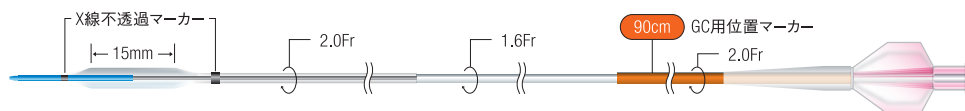

カテーテル有効長117cm

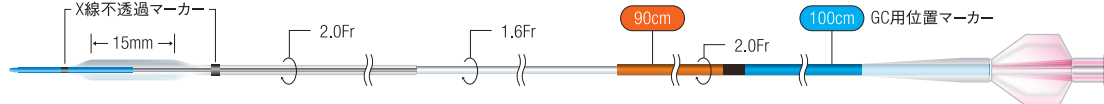

■仕様

カタログ番号	有効長 (cm)	適合GC (Fr)	カテーテル外径 (Fr)	
			Midシャフト	ハイボチューブ
ED2915-107	107	6、7、8	2	1.6
ED2915-117	117			

バルーン		拡張圧		チップ長 (mm)	JANコード
有効長 (mm)	外径 (mm)	NP (atm)	RBP (atm)		
15	2.9 (推奨拡張圧時)	8	14	5	4580737310628 4580737310635

- 販売名:Victoria エクスチェンジデバイス
- 承認番号:30300BZX00045000
- 一般的名称:冠動脈カテーテル交換用カテーテル、肺動脈カテーテル交換用カテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 再利用禁止
- 保険請求分類:血管内手術用カテーテル/交換用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際に、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者