


仕様

カタログ番号	有効長 [cm]	全長 [cm]	コーティング長 [cm]	先端形状	Dead Space Volume[mL]	JANコード
MCEL110	110	119	60	ストレート	0.42	4580737310970
MCEL110M	110	119	60	45° (ミニマルチパーパス)	0.42	4580737310987
MCEL110F	110	119	60	90° アングル	0.42	4580737311007
MCEL110W	110	119	60	ダブルアングル	0.42	4580737310994
MCEL135	135	144	80	ストレート	0.48	4580737311014
MCEL135M	135	144	80	45° (ミニマルチパーパス)	0.48	4580737311021
MCEL135F	135	144	80	90° アングル	0.48	4580737311045
MCEL135W	135	144	80	ダブルアングル	0.48	4580737311038
MCEL150	150	159	120	ストレート	0.52	4580737311052
MCEL150M	150	159	120	45° (ミニマルチパーパス)	0.52	4580737311069
MCEL150F	150	159	120	90° アングル	0.52	4580737311083
MCEL150W	150	159	120	ダブルアングル	0.52	4580737311076
MCEL165	165	174	120	ストレート	0.56	4580737311090

ディスタル 外径[Fr]/内径[inch]	プロキシマル 外径[Fr]/内径[inch]	適合最小ガイドイング カテーテル内径[inch]	適合最大 ガイドワイヤ径[inch]	マーカ―数	最大耐圧 [psi]
1.6/0.017	2.8/0.023	0.038	0.016	1	1000

形状図

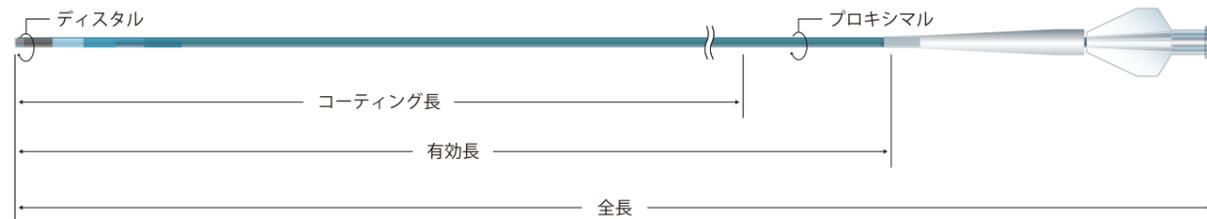

- 販売名:TMP マイクロカテーテルXI
- 承認番号:30700BZX00111000
- 一般的な名称:中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地
 お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
 URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>
 E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者

カーネリアンシリーズの フレキシブルタイプ

先端柔軟化によるWireTrackabilityの向上※1
スムーズな末梢到達性をサポート

※1 当社従来品 (PIXIE シリーズ) との比較



Effective
効果的※2

Low profile
細径化

Flexibility
柔軟性


※2 当社従来品(PIXIE シリーズ) と比較して高いWire Trackability を有するため

●フローレート※3

有効長	110		135		150		165	
造影剤名称 イオパミロン	ヨード含有量(mg/mL)		ヨード含有量(mg/mL)		ヨード含有量(mg/mL)		ヨード含有量(mg/mL)	
	300	370	300	370	300	370	300	370
600psi/(mL/sec)	2.2	1.3	1.9	0.9	1.7	0.9	1.6	0.8
800psi/(mL/sec)	2.9	1.8	2.5	1.4	2.4	1.3	2.2	1.2
1000psi/(mL/sec)	3.7	2.4	3.2	1.9	3.0	1.8	2.9	1.6

※3 試験条件 使用装置:メドラッドマークVプロビス/造影剤温度:37℃/リニアサイズ:0.3sec 実際の使用においては、諸条件により流用が異なる場合があります

柔軟な先端

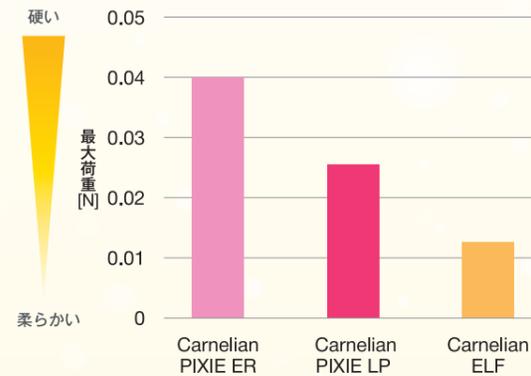


柔軟なカテーテル先端部の設計となっております。
当社マイクロカテーテルの中で最も※4柔軟な商品
となっております。

※4 2026年2月現在

豊富な先端形状 ラインナップ

活躍シーンに合わせた形状選択が可能

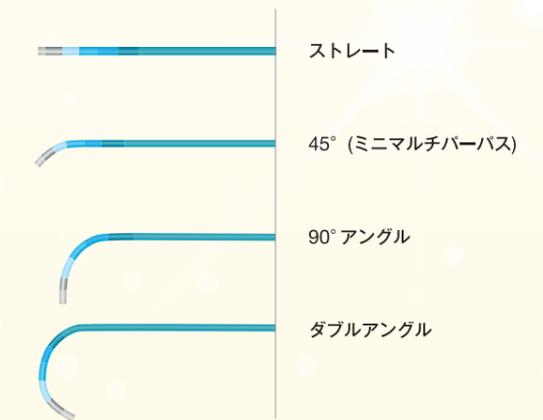

充実した付属品



- 1 Carnelian ELF本体
- 2 止血弁
- 3 シェイピングマンドレル
- 4 インサータ
- 5 1mLシリンジ

GW 追従性

比較動画公開中 ▶

