

製品仕様

OPTIMO[®]

カタログ番号	カテーテル有効長(cm)	カテーテル全長(cm)	カテーテル外径(Fr)/内径(inch)	バルーン外径(mm)	適応シース径(Fr)	JANコード
BG887DL	90	95	8/0.087	12	8	4580737310734

TMPダイレーターI

カタログ番号	外径(mm)	有効長(cm)	適合ガイドワイヤー径(inch)	JANコード
DL887A	2.16	107.8	0.035	4580737310574

バルーンコンプライアンスチャート

カテーテル外径(Fr)	0.1mL	0.2mL	0.3mL	0.4mL	注入容量 0.5mL	0.6mL	0.7mL	0.8mL	0.9mL	1.0mL
8	5.0mm	6.7mm	7.8mm	8.7mm	9.4mm	10.0mm	10.5mm	10.9mm	11.4mm	12.0mm

※本値はin vitroでの参考値です
※臨床では、透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用下さい

バルーン最大拡張径

- ☐販売名:オプティモテンボラリーオクリュージョンバルーン
- ☐承認番号:22000BZX00050000
- ☐一般的名称:中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
- ☐クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- ☐再使用禁止
- ☐保険請求分類:血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル/特殊型

- ☐販売名:TMPダイレーターI
- ☐認証番号:302AFBZX00032000
- ☐一般的名称:カテーテル拡張器
- ☐クラス分類:管理医療機器 クラスⅡ
- ☐再使用禁止
- ☐保険請求分類:ダイレーター

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

**株式会社
東海メディカルプロダクツ**

本社／〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL


<https://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail

info@tokaimedpro.co.jp

販売業者

OPTIMO[®]
Dilator Kit

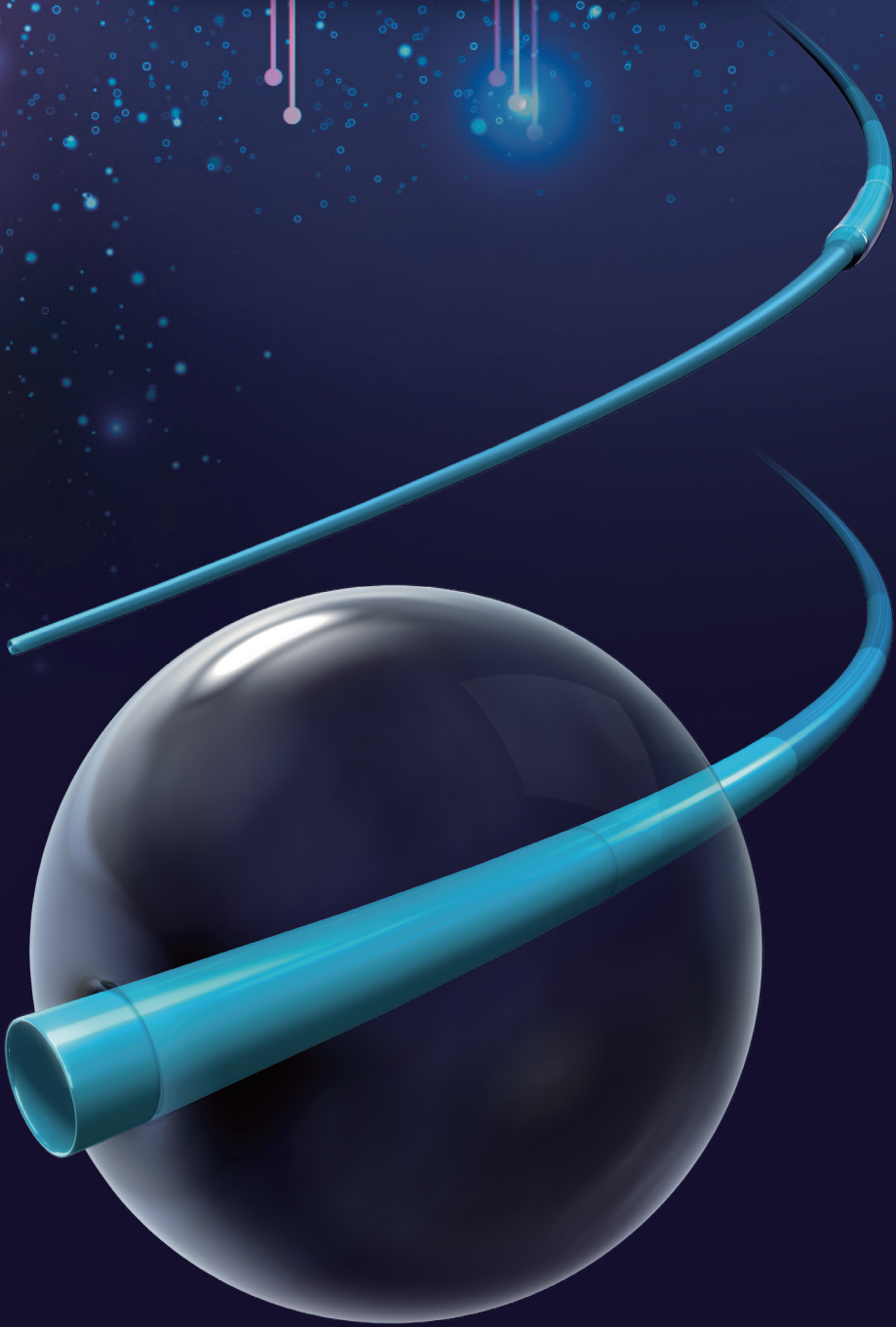

OPTIMO[®] Dilator Kit


シースレス挿入に必要なデバイスを
ワンパッケージ化



OPTIMO[®]専用ダイレーター同梱


OPTIMO[®]に組み合わせ可能な医療機器である弊社のTMPダイレーターIを同梱しました。

OPTIMO[®]をシースレス挿入用に改良

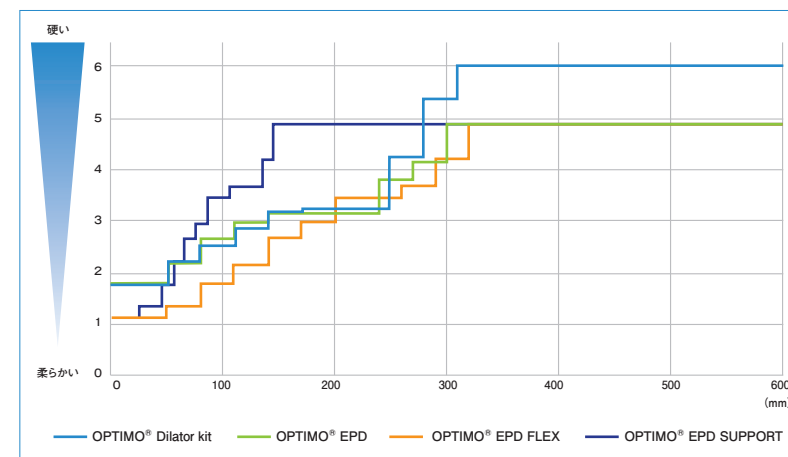


シャフトバランスも シースレス挿入用 に変更

シャフトの硬度バランスを見直し、
先端部の耐キンク性を向上させ
ました。

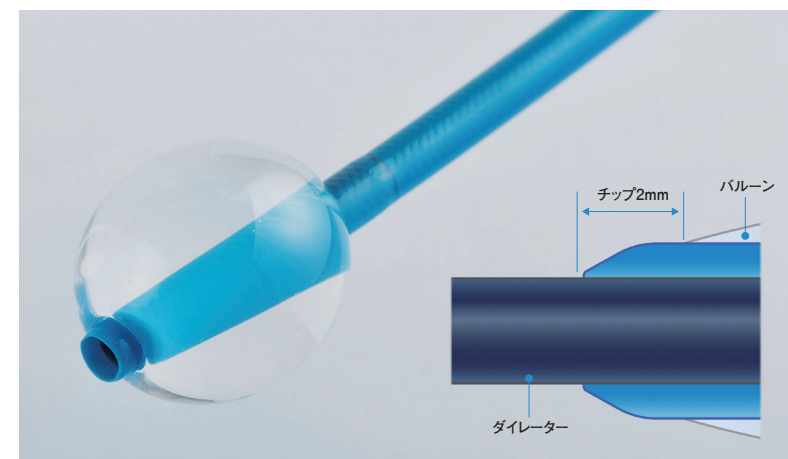

先端2mmに チップを追加

穿刺時抵抗の低減と従来の
使用感を維持できるよう、先端
2mmにチップを付けました。

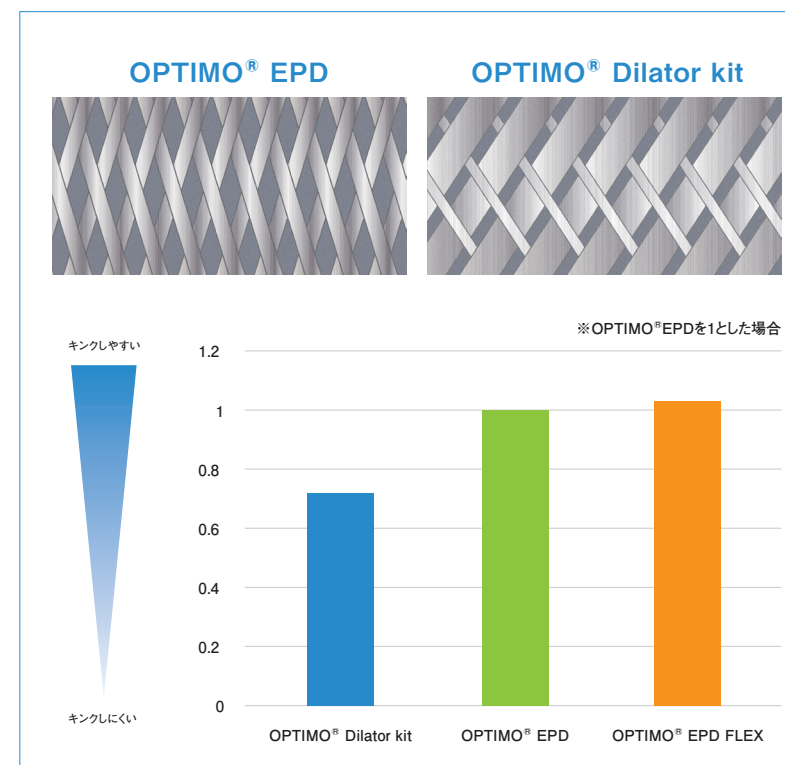

シャフト構造 を改良

シースレス挿入に負けない
ブレード構造に変更しました。